

SENSATION[®]
The Art of Beauty

B SIDE TRAINER
electrical muscle stimulation



ISTRUZIONI PER L'USO

Art. 231



Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio. Conservarle per consultazioni future.

AVVERTENZE

Non utilizzare il dispositivo per trattare o alleviare un dolore non diagnosticato.
Se necessario utilizzare il dispositivo sotto la supervisione di un fisioterapista.
Non utilizzare il dispositivo nelle vicinanze del cuore o se la pelle è irritata.
Consultare il proprio medico prima di usare il dispositivo se si assumono medicinali.
Non utilizzate l'apparecchio se:

avete apparecchi elettronici (ad es. un pacemaker) o soffrite di problemi cardiaci.

- Siete in gravidanza.
 - Soffrite di cancro, di epilessia o siete sotto osservazione medica per disfunzioni cognitive.
- Evitare di utilizzare l'apparecchio mentre si guida, si utilizzano macchinari o si va in bicicletta.
Non utilizzare in luoghi umidi come il bagno.

Tenere lontano da oggetti metallici o appuntiti.

NB: nel caso in cui per un qualsiasi motivo avete dei dubbi sul fatto di usare questo dispositivo, consultate prima il vostro medico.

Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso per il quale è stato concepito e nel modo indicato in questo manuale. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

Prima dell'utilizzo assicurarsi che il dispositivo si presenti integro senza visibili danni.

Non lasciare l'apparecchio incustodito alla portata di bambini.

Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.

Non posizionare l'apparecchio vicino a fonti di calore o materiali infiammabili.

Non tentare di smontare o modificare l'apparecchio.

ATTENZIONE

I sacchetti in polietilene che contengono prodotti e imballaggi possono essere pericolosi. Tenere questi sacchetti fuori della portata di bambini e neonati. Non utilizzare in culle, lettini, passeggini o box per bambini. La pellicola sottile può infatti aderire a naso e bocca e impedire la respirazione. Un sacchetto non è un giocattolo.

- Non adatto a bambini.
- Il prodotto non è progettato per essere utilizzato da persone (compresi bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte.
- I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Cos'è la Tecnologia EMS?

EMS, Electrical Muscle Stimulation, è conosciuta anche come stimolazione elettrica neuromuscolare (NMES) ossia la sollecitazione della contrazione muscolare mediante l'uso di impulsi elettrici. Gli impulsi imitano la potenziale azione proveniente dal sistema nervoso centrale causando così la contrazione dei muscoli.

La tecnologia EMS è quindi un efficace strumento per il rafforzamento muscolare.

La tecnologia EMS è utile per:

- allenare e tonificare i muscoli
- scopi riabilitativi
- prevenire l'atrofia muscolare
- aumentare la circolazione sanguigna locale

DESCRIZIONE

IMPORTANTE: per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito: www.macomsrl.it/garanzia



Fronte unità di controllo

Retro unità di controllo

Fronte elettrostimolatore

Retro elettrostimolatore

BATTERIA


Utilizzare una batteria al litio CR2032

Per inserire per la prima volta le pile o per sostituirle.

Sollevare delicatamente la parte superiore dell'unità di controllo aiutandosi se necessario con un'unghia. Non ruotare con forza: si potrebbe danneggiare.

Inserire la batteria prestando attenzione alla corretta polarità.

Chiudere.

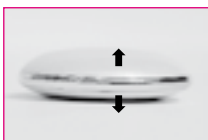

DISPOSITIVO

Con il tempo e l'uso il gel dell'elettrostimolatore si consuma, si consiglia di sostituirlo:

- se è stato utilizzato per più di 30 volte o se è aperto da più di un mese
- se non è più adesivo per la presenza di sporco che non può essere rimosso.



Nota: dopo l'uso, riporre sempre l'elettrostimolatore ben steso, evitando pieghe sulla sua base di protezione.

COME FUNZIONA

Si consiglia di utilizzare il dispositivo una volta al giorno

Prima di utilizzare il dispositivo pulire l'area da trattare da sudore o creme.

Se possibile evitare di toccare il gel.

- 1 Collegare l'unità di controllo all'elettrostimolatore. (Figura A)
- 2 Accendere l'unità di controllo premendo il pulsante ON/OFF (l'indicatore luminoso lampeggerà per 3 volte). (Figura B)
Posizionare l'elettrostimolatore sui glutei (Figura C).
(Nota: il dispositivo si spegne automaticamente, dopo 5 secondi, se non viene utilizzato sul corpo).



Figura A

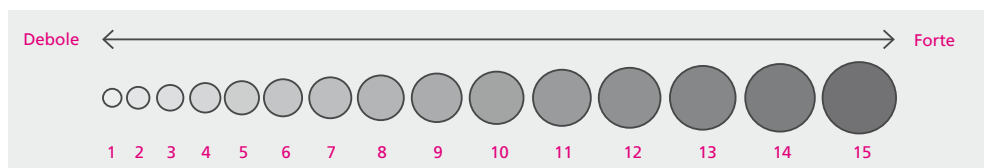


Figura B

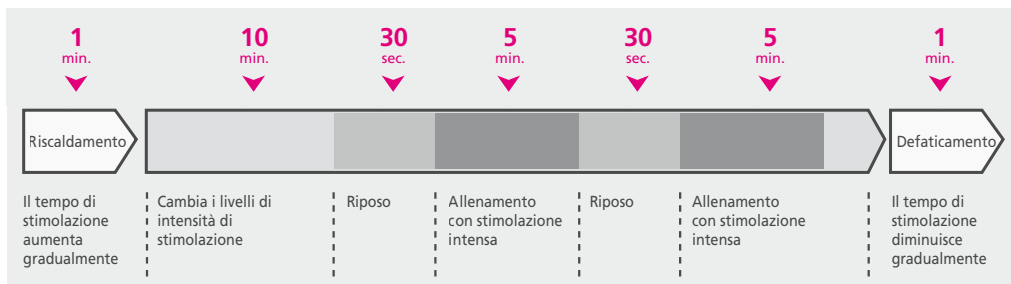


Figura C

- 3 Una volta accesa l'unità di controllo si posiziona a livello 1. È possibile regolare l'intensità delle stimolazioni (passando da un livello 1 ad un livello 15 e viceversa) premendo il tasto + o - sull'unità di controllo.



4 Programma standard: ha una durata di 23 minuti, al termine dei quali il dispositivo si arresta automaticamente.



5 Al termine, rimuovere l'elettrostimolatore dal corpo e premere ON/OFF sull'unità di controllo. L'indicatore luminoso lampeggerà per 3 volte.

Pulsante	Luce LED Blu
ON/OFF	lampeggia 3 volte
+	lampeggia 1 volta
-	lampeggia 1 volta
Auto spegnimento OFF	lampeggia 3 volte

6 Dopo l'uso riporre il l'elettrostimolatore sulla base di protezione.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Elettrostimolatore

Dimensioni: L 25,0 x H 19,9 cm

Colore: nero silver azzurro

Unità di controllo

Dimensioni: ø 4,0 cm x H 1,1 cm

Funzionamento: Batteria CR2032

Voltaggio: 3V / CR2032

Frequenza: 4-35Hz

Colore: bianco

Peso: 8 g

GARANZIA CONVENZIONALE

**IMPORTANTE: per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito:
www.macomsrl.it/garanzia**

Offerta da: **Macom S.r.l.** - Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

La presente Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti spettanti ai consumatori sulla base del D.lgs. 206/2005 - "Codice del Consumo" - in attuazione della direttiva 1999/44/CE.

Macom S.r.l. garantisce che il prodotto è immune da difetti originari del processo di fabbricazione e da difetti derivanti dai materiali utilizzati per la fabbricazione medesima. In caso di accertata presenza dei suddetti difetti che dovessero verificarsi durante il periodo di garanzia, **Macom S.r.l.** provvederà alla riparazione, qualora la riparazione non sia possibile o non sia opportuna **Macom S.r.l.** provvederà a fornire un prodotto esente da difetti. La presente Garanzia Convenzionale ha durata di due anni e perde la propria validità automaticamente allo scadere dei 2 anni dalla data di acquisto del prodotto.

La presente Garanzia Convenzionale è esclusa in caso di:

1. Difetti causati da un errato utilizzo del prodotto e/o da una manutenzione non conforme alle prescrizioni contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze fornito unitamente al prodotto.
2. Modifiche, alterazioni, manomissioni del prodotto o delle parti componenti del prodotto.
3. Utilizzo del prodotto con accessori non forniti con il prodotto o non autorizzati da **Macom S.r.l.** o riparazioni da parte di persone non autorizzate da **Macom** medesima.
4. Utilizzo del prodotto per scopi commerciali o professionali o, comunque, per scopi diversi da quelli indicati da **Macom** nel manuale di istruzioni ed avvertenze.

La presente garanzia convenzionale è valida esclusivamente in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. **Macom S.r.l.** declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose o all'ambiente derivanti da un utilizzo del prodotto non conforme alle prescrizioni di montaggio, uso e manutenzione contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze che accompagna il prodotto medesimo.

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO



Questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria vigente sullo smaltimento e la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del "contenitore di spazzatura barrato" riportato sul prodotto indica che lo stesso è soggetto a regime di raccolta separata previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e che pertanto non va smaltito come normale rifiuto urbano. Il prodotto quando raggiunge la fine del proprio ciclo di vita non dovrà essere smaltito con i rifiuti domestici bensì attraverso gli appositi sistemi di raccolta dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente sarà facoltà dell'utente riconsegnare il prodotto al venditore il quale provvederà al ritiro gratuito dello stesso ed al trasporto presso i centri di raccolta differenziata. Si raccomanda uno scrupoloso rispetto delle norme sull'uso e sullo smaltimento del prodotto al fine di evitare la dispersione di sostanze pericolose che potrebbero causare effetti negativi per l'ambiente e per la salute umana. Un corretto smaltimento del prodotto favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è punito dalla legge e comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.



Questo apparecchio è conforme alle direttive dell'Unione Europea pertinenti e applicabili.

MACOM srl

Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

Tel: +39 02 33 10 76 56 - Fax: +39 02 33 10 45 23

e-mail: info@macomsrl.it - www.macomsrl.it