

THERMO PONCHO PLUS
neck & shoulder heating pad



Manuale di istruzioni

Art. 935

Prima di utilizzare questo apparecchio leggere attentamente questo manuale, in particolare le avvertenze sulla sicurezza, e conservarlo per consultazioni future.

Precauzioni

Quando si usano apparecchiature elettriche è importante rispettare alcune precauzioni fondamentali fra cui le seguenti:

- Assicurarsi che i dati della tensione di rete indicati sull'apparecchio corrispondano a quelli della vostra rete elettrica.
- E' necessaria massima attenzione quando si utilizza l'apparecchio in presenza di bambini: questo apparecchio non è un giocattolo. Si consiglia di posizionarlo lontano dalla loro portata.
- Questo apparecchio deve essere usato unicamente come termoforo per uso domestico. Qualsiasi altro uso è considerato non conforme e quindi pericoloso.
- Utilizzare l'apparecchio solo come raccomandato in questo manuale. Non utilizzarlo per scopi diversi.
- L'uso di accessori o componenti non espressamente raccomandati possono creare danni all'apparecchio e risultare pericolosi.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato.
- Non appoggiare oggetti pesanti sull'apparecchio.
- Non immergere mai l'apparecchio, la spina ed il cavo elettrico in acqua o altri liquidi.
- Non usare l'apparecchio se il cavo elettrico o la spina risultano danneggiati, o se l'apparecchio stesso risulta difettoso. In caso di guasto non tentare di riparare l'apparecchio; qualsiasi intervento deve essere effettuato da personale autorizzato. Contattare Macom.
- Non tirare il cavo, non trasportare l'apparecchio afferrandolo dal cavo. Non chiudere il cavo tra le porte e non avvolgerlo su oggetti taglienti o a spigoli vivi.
- Per scollegare l'apparecchio, disinserire la spina di alimentazione dalla presa elettrica. Non tirare il cavo.
- Usare sempre l'apparecchio lontano da fiamme o sorgenti di calore.
- Non usare l'apparecchio vicino ad acqua o fonti umide.
- Non maneggiare l'apparecchio, il cavo e la spina con le mani bagnate.
- Non utilizzare questo apparecchio all'esterno. Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc...).
- Disinserire sempre la spina di alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione e in caso di mancato utilizzo dell'apparecchio
- Prima di riporre l'apparecchio attendere che si sia raffreddato. Assicurarsi che non vi sia sopra alcun oggetto

Avvertenze

I bambini di età inferiore ai 3 anni non devono usare l'apparecchio a causa della loro incapacità di reagire in caso di surriscaldamento.

Non utilizzare l'apparecchio se bagnato.

Non utilizzare l'apparecchio per riscaldare animali.

Non addormentarsi con l'apparecchio in funzione.

Non inserire aghi o spilli.

Non piegare l'apparecchio.

Non utilizzare l'apparecchio con bambini, persone insensibili al calore o molto vulnerabili incapaci a reagire al surriscaldamento.

Se durante l'uso si manifestano fastidi o dolori interrompere immediatamente.

Qualora lo si ritenga opportuno per la propria salute consultare il proprio medico prima di utilizzare l'apparecchio.

Qualora si verificano dolori persistenti a muscoli e articolazioni, consultare un medico.

Attenzione


Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini di età superiore agli 8 anni o da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza esperienza e conoscenza, purchè siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

I sacchetti in polietilene utilizzati per l'imballaggio possono essere pericolosi. Tenere questi sacchetti fuori della portata di bambini e neonati. La pellicola sottile può infatti aderire a naso e bocca e impedire la respirazione. Un sacchetto non è un giocattolo.

DESCRIZIONE PRODOTTO

IMPORTANTE: per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito:
www.macomsrl.it/garanzia

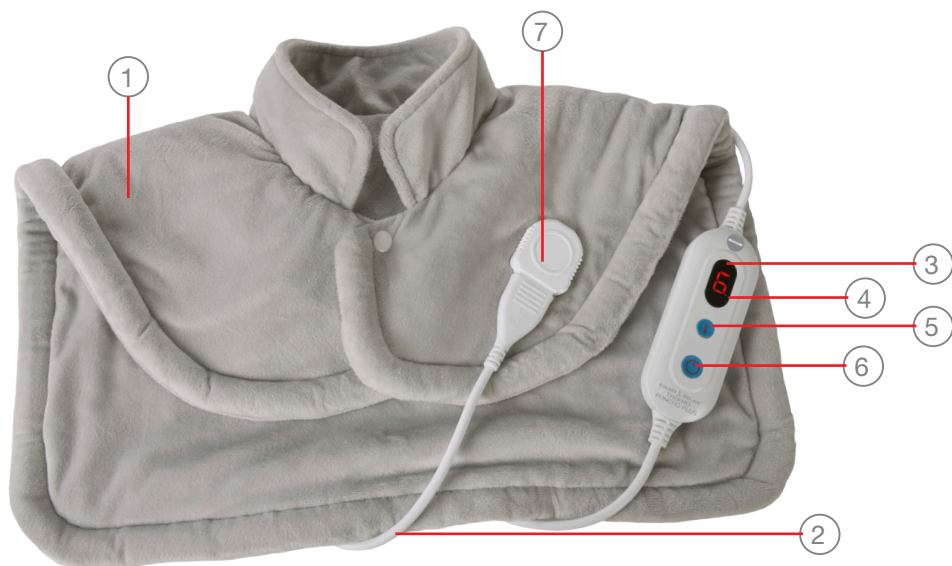


- 1 Termoforo in morbido tessuto
- 2 Cavo di alimentazione
- 3 Indicatore luminoso
- 4 LED luminoso che indica attivo l'autospegnimento automatico
- 5 Regolatore di intensità di calore
- 6 Tasto ON/OFF
- 7 Attacco per cavo di alimentazione

USO

Prima del primo uso controllare l'integrità dell'apparecchio e in caso di dubbio contattare Macom.

Collegare la spina alla presa di corrente, posizionare il termoforo sulla spalle, e regolare la chiusura nella posizione desiderata.

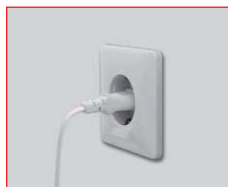

Premere il tasto ON/OFF per accendere il termoforo e selezionare il livello di intensità di calore desiderato da 1 a 6: 1-2 basso, 3-4 medio, 5-6 alto.

Al termine dell'utilizzo spegnere il termoforo e disinserire la spina elettrica dalla presa di corrente.

Note:

Questo prodotto non è un apparecchio medico, non è stato progettato per essere usato in ambienti ospedalieri o per uso commerciale. Il suo unico uso è domestico. Non usare su bambini, su persone insensibili al calore o incapaci di reagire al surriscaldamento.

Autospegnimento

Il termoforo è dotato di un sistema di spegnimento automatico che si attiva dopo circa 90 minuti di funzionamento continuo. Se dopo l'autospegnimento desiderate utilizzare ancora l'apparecchio, premere l'interruttore ON/OFF e impostare l'intensità di calore desiderata.



Per il buon funzionamento verificare che l'apparecchio sia correttamente collegato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio: **220-240V - 50/60Hz**

Potenza: **100W**

Dimensioni: **52 x 56 cm**

Colore: **azzurro**

Pulizia e manutenzione

Prima di procedere con la pulizia disinserire la spina dalla presa elettrica e aspettare che l'apparecchio si sia completamente raffreddato.

Scollegare il cavo di alimentazione dal connettore posto sopra la copertura in panno.

Lavare a mano come da istruzioni riportate sull'etichetta.

Non usare candeggina.

Lavabile in lavatrice fino a 30 °C su ciclo delicato. Non asciugare in asciugatrice.

Non stirare. Non lavare a secco

Utilizzare l'apparecchio solo se completamente asciutto.

Riporre il termoforo in luogo asciutto e pulito senza appogiarvici sopra alcun oggetto.



**Prima dell'uso leggere attentamente il manuale di istruzioni.
Conservarlo per l'intera durata del prodotto.**



Non adatto a bambini di età inferiore ai tre anni.



Non inserire aghi e spilli.



Non piegare.



Lavaggio a mano.



Non pulire a secco.



Non asciugabile in macchine asciugabiancheria.



Non candeggiare.



Non stirare.



Temperatura lavaggio.

GARANZIA CONVENZIONALE

IMPORTANTE: per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito:
www.macomsrl.it/garanzia

Macom S.r.l. - Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

La presente Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti spettanti ai consumatori sulla base del D.lgs. 206/2005 - "Codice del Consumo" - in attuazione della direttiva 1999/44/CE.

Macom S.r.l. garantisce che il prodotto è immune da difetti originari del processo di fabbricazione e da difetti derivanti dai materiali utilizzati per la fabbricazione medesima. In caso di accertata presenza dei suddetti difetti che dovessero verificarsi durante il periodo di garanzia, **Macom S.r.l.** provvederà alla riparazione, qualora la riparazione non sia possibile o non sia opportuna **Macom S.r.l.** provvederà a fornire un prodotto esente da difetti. La presente Garanzia Convenzionale ha durata di due anni e perde la propria validità automaticamente allo scadere dei 2 anni dalla data di acquisto del prodotto.

La presente Garanzia Convenzionale è esclusa in caso di:

1. Difetti causati da un errato utilizzo del prodotto e/o da una manutenzione non conforme alle prescrizioni contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze fornito unitamente al prodotto.
2. Modifiche, alterazioni, manomissioni del prodotto o delle parti componenti del prodotto.
3. Utilizzo del prodotto con accessori non forniti con il prodotto o non autorizzati da **Macom S.r.l.** o riparazioni da parte di persone non autorizzate da Macom medesima.
4. Utilizzo del prodotto per scopi commerciali o professionali o, comunque, per scopi diversi da quelli indicati da Macom nel manuale di istruzioni ed avvertenze.

La presente garanzia convenzionale é valida esclusivamente in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. **Macom S.r.l.** declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose o all'ambiente derivanti da un utilizzo del prodotto non conforme alle prescrizioni di montaggio, uso e manutenzione contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze che accompagna il prodotto medesimo.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria vigente sullo smaltimento e la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del “contenitore di spazzatura barrato” riportato sul prodotto indica che lo stesso è soggetto a regime di raccolta separata previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e che pertanto non va smaltito come normale rifiuto urbano. Il prodotto quando raggiunge la fine del proprio ciclo di vita non dovrà essere smaltito con i rifiuti domestici bensì attraverso gli appositi sistemi di raccolta dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente sarà facoltà dell’utente riconsegnare il prodotto al venditore il quale provvederà al ritiro gratuito dello stesso ed al trasporto presso i centri di raccolta differenziata. Si raccomanda uno scrupoloso rispetto delle norme sull’uso e sullo smaltimento del prodotto al fine di evitare la dispersione di sostanze pericolose che potrebbero causare effetti negativi per l’ambiente e per la salute umana. Un corretto smaltimento del prodotto favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è punito dalla legge e comporta l’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.



Questo apparecchio è conforme alle direttive dell’Unione Europea pertinenti e applicabili.



Questo apparecchio è dotato di doppio isolamento.



Apparecchio conforme ai requisiti di sicurezza.

MACOM srl

Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

Tel: +39 02 33 10 76 56 - Fax: +39 02 33 10 45 23

e-mail: info@macomsrl.it - www.macomsrl.it